

EasyDirect™ Nem Yazılımı ile Kolay Veri Yönetimi



Verileri Otomatik Olarak Toplayın

Beş enstrümana kadar nem verilerini toplayin. SQL veritabanını temel alan elektronik veri kullanımı sayesinde manuel kayıt hatalarını en aza indirin, zamandan kazanın ve verileri güvenli bir şekilde depolayın.



Etkili Sonuç İşleme

Sonuçları inceleyin, tarihe, cihaza, kullanıcıya veya numuneye göre filtreleyin. Sonuçları grafikler halinde görselleştirin ve etkili sonuç analizi için istatistik oluşturun.



Kolay Raporlama

Nem içeriği sonuçları hakkında basit ve net raporlar oluşturun. Verileri bilgisayara çeşitli biçimlerde (CSV, XML veya PDF) aktarın veya bir ağ yazıcısında yazdırın.



Merkezi Cihaz Yönetimi

Cihazınızın her zaman güncel ve doğru nem sonuçları sağlamaya hazır olduğundan emin olun. Cihazın durumunu izleyin ve rutin test ve servis zamanlarını planlayın.




Nem Sonucu Verisi Kullanımı Artık Çok Kolay

Nem tayin cihazlarınızı EasyDirect Nem Bilgisayar Yazılımına bağlayın ve verilerinizin yönetimini ve işlenmesini iyileştirin. Yazılımın kurulumu ve ayarları kolay ve hızlıdır, kullanımı pratiktir.


Nem tayini iş akışlarınızın verimliliğini artırın: Nem verilerini otomatik olarak toplayin, raporlar oluşturun, kontrol çizelgelerinde sonuçları görselleştirin, istatistikleri uygulayın ve enstrümanlarınızı merkezi olarak yönetin.

45 günlük ücretsiz deneme sürümünüzü şu adresten indirin:


► www.mt.com/Moisture-Software

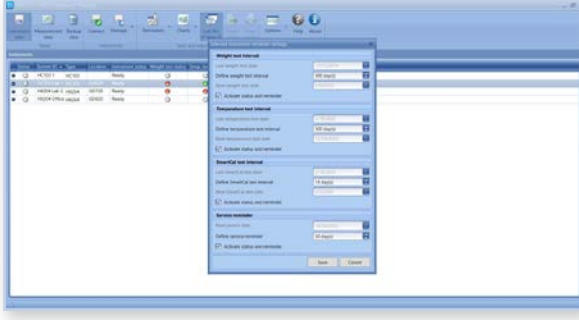

Rutin Enstrüman Testini Planlama

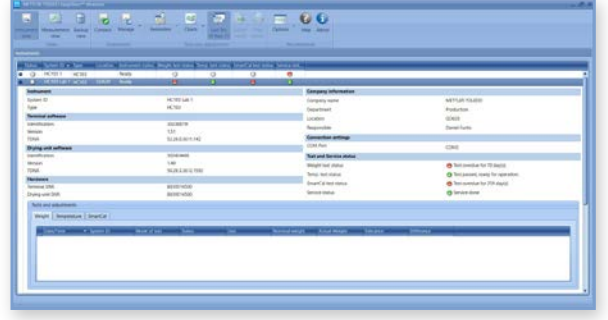

Monitör Testi ve Servis Durumu

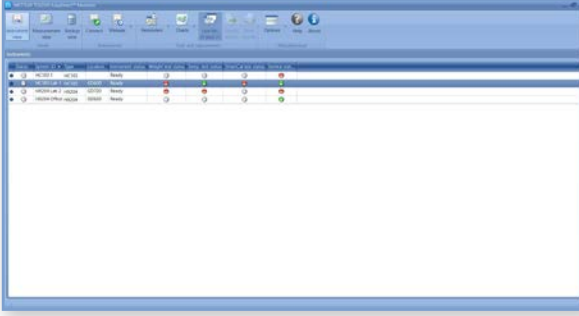

Enstrümanlara Genel Bakış



Kurutma Eğrisinin Görselleştirilmesi

Teknik Açıklama

Desteklenen Enstrümanlar	HX204, HS153, HC103	
Maks. Enstrüman Sayısı	5	
Bağlantı	HC103	USB, RS232
	HX204, HS153	USB, RS232, Ethernet, Wi-Fi
Veritabanı	SQL Express 2022	
PC Gereksinimleri	İŞLETİM SİSTEMİ: Windows 10 (Update ≥20H2), Windows 11 64-bit	
Veri Toplama	Ölçüm sonuçları, Test ve Ayarlama sonuçları	
Rapor Biçimleri	PDF, CSV, XML	
Enstrüman Yönetimi	Rutin test ve servis programlama ile hatırlatıcı, Cihaz ve duruma genel bakış	
Koruma	Ayarlar ve sonuçlar için parola koruması	
Diller	İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Polonyaca, Çekçe, Macarca, Portekizce, Japonca, Çince, Korece	